



IPL 7800  
COOL PRO

**beurer**  
beauty

## IPL 7800 COOL PRO IPL Haarentfernungsgerät




Bis zu 1 Mio. Lichtimpulse



3,8 cm<sup>2</sup> Lichtfläche für eine besonders schnelle Anwendung



Mit 5 verschiedenen Intensitätsstufen

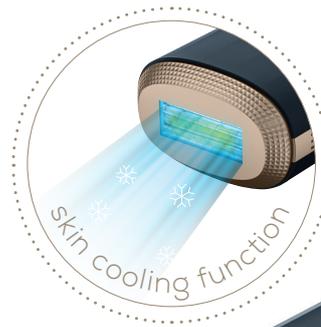

Zusätzliche Cooling Funktion sorgt für eine angenehm kühle Anwendung auf der Haut

Modernste IPL-Lichttechnologie, die auch von Hautärzten zur professionellen Haarentfernung angewendet wird. Deaktiviert die Haarwurzel tief unter der Haut und verhindert so das Nachwachsen der Haare.

3,8 cm<sup>2</sup> Lichtfläche für eine besonders schnelle Anwendung in nur ca. 23 Min. auf niedrigster Energiestufe für Arme, Beine, Gesicht, Achselhöhlen und Bikinizone

Hohe Sicherheit mit integriertem Hautkontaktsensor

Integrierter UV-Filter zum Schutz der Haut

Mit praktischem "Auto-Flash" Modus für eine komfortable Anwendung

Bis zu 50% Haarreduzierung nach 3-4 Behandlungen

Nicht anwendbar auf dunklen Hautfarben, kann bei weißem oder hellem Haar unwirksam sein.



Netzbetrieb:

Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz; 1,0 A

Ausgang: 12,0 V === 4,0 A; 48 W

Produktmaße (LxBxH): 16,4 x 6,1 x 3,9 cm

Produktgewicht: ca. 280 g

3 Jahre Garantie


VE: 4 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 57503 8


Art.-Nr.: 575.03




## WIRKUNGSWEISE

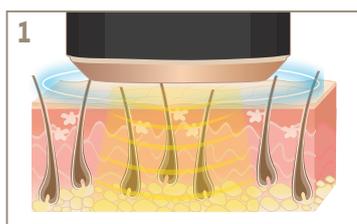

1 Das Melanin der Haare absorbiert das Licht.

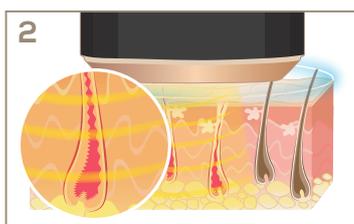

2 Die erzeugte Wärme deaktiviert den Haarfollikel. Die zusätzliche Cooling Funktion sorgt für eine angenehm kühle Anwendung auf der Haut.

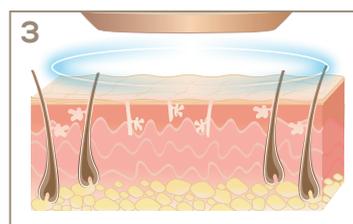

3 Das Haar fällt aus und wächst nicht mehr nach.

## HAAR- UND HAUTFARBENTABELLE

		Hautfarbe					
Haarfarbe		X	X	X	X	X	X
		✓	✓	✓	X	X	X
		✓	✓	✓	✓	X	X
		✓	✓	✓	✓	✓	X
		✓	✓	✓	✓	✓	X

## ANWENDUNG

- ① **1.-2. Woche:** 3x pro Woche verwenden →
- ② **3.-5. Woche:** 2x pro Woche verwenden →
- ③ **ab der 6. Woche:** 1-2x pro Monat verwenden →

Wiederholung der Behandlung, falls erforderlich